

2020年10月

お客さま 各位

**「エスプライン® SARS-CoV-2」
鼻腔ぬぐい検体適用追加のご案内**お客様コールセンター
TEL.0120-292-026（フリーダイヤル）

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、SARSコロナウイルス抗原キット「エスプライン SARS-CoV-2」の鼻腔ぬぐい液検体追加の変更承認（令和2年10月2日 承認事項一部変更承認）に伴い、本製品の適用検体種に鼻腔ぬぐい液を追加いたしましたのでご案内申し上げます。なお、鼻腔ぬぐい液での検体調整方法は、鼻咽頭ぬぐい液検体に準じます。

今後ともより一層のご愛顧とお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 適用日

適用日	2020年10月2日（金）
-----	---------------

製品性能に変更はありません。ご施設在庫の製品についても適用されます。

2. 対象製品

260319	エスプライン SARS-CoV-2	10テスト
260326		100テスト

3. 鼻腔ぬぐい液検体の採取方法

詳細な内容に関しましては別紙をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【別紙】鼻腔ぬぐい液検体の採取方法について


以上

ご不明な点は、お客様コールセンター(0120-292-026)までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

GCS-20092

【別紙】 鼻腔ぬぐい液の検体採取方法について

鼻腔ぬぐい液の検体採取方法

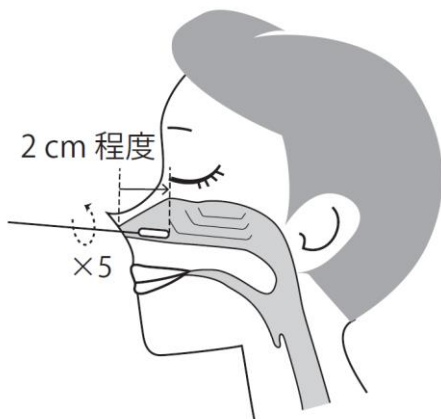

滅菌綿棒を、鼻孔に水平に2 cm程度挿入し、滅菌綿棒を5回程度回転させます。挿入した部位で5秒程度静置したのち、滅菌綿棒の先端が他の部位に触れないように注意深く引き抜きます。